



Vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen,
kijk dan op unilabs.nl.

Afname-instructie

Onderzoek naar bloed
in de ontlasting




Welkom bij Unilabs

Uw behandelend (huis)arts heeft diagnostiek voor u aangevraagd waarvoor u zelf de afname uitvoert. In deze instructie wordt de afname stap voor stap uitgelegd. Voor een goede afname vragen we u de instructies vooraf goed door te nemen.


Belangrijk om te weten voor de zelfafname

- Het materiaal binnen **24 uur** na afname inleveren, tot die tijd in de koelkast bewaren.
- Het potje dat u heeft meegekregen is steriel en klaar voor gebruik. U mag het potje voor gebruik niet omspoelen of afwassen.
- Moet u ook bloed laten afnemen? Sluit het zakje niet af en lever deze open in bij een medewerker bloedafname.

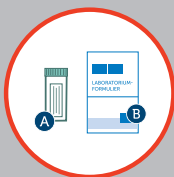

1

Wat heeft u meegekregen:
a. Potje met schepje in de dop
b. Aanvraagformulier

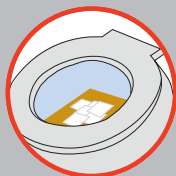

2

Zorg ervoor dat er geen water of urine bij uw ontlasting komt. Leg daarom voldoende velletjes toiletpapier in het toilet. U kunt ook eerst een stuk karton in het toilet leggen.




3

Ga naar het toilet en zorg ervoor dat uw ontlasting op het papier en/of karton valt.



4

Houd het buisje rechtop, er zit vloeistof in de buis. Draai de dop van het buisje en schraap met het uiteinde van het stokje over de ontlasting. Zorg er voor dat de ribbeltjes aan het uiteinde helemaal gevuld zijn.

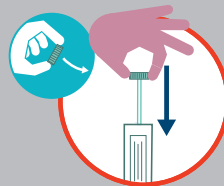

5

Steek het stokje in de buis en druk de dop stevig aan. Het buisje hierna niet meer openen.

Schrijf uw naam en geboortedatum op het etiket.

Schrijf niet door de barcode heen.

6

Plaats de buis en het aanvraagformulier in het zakje waar u het buisje uit heeft gehaald. Plak het zakje dicht met de plakstrip aan de binnenzijde en lever het materiaal binnen 24 uur in bij een Unilabs locatie.