



SHO

Centra voor
medische diagnostiek

Kijk op www.sho.nl voor onze locaties
en openingstijden.

T 088 - 999 77 77

210011 - oktober 2017

Onderzoek

SOA diagnostiek vrouw: vaginale uitstrijk



Op verzoek van uw (huis)arts wordt onderzoek verricht op een vaginale uitstrijk om vast te stellen of u een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) heeft zoals chlamydia, gonorroe of trichomoniasis.

U verzamelt hiervoor wat materiaal uit uw vagina met een wattenstokje.

In deze folder geven wij instructie hoe u de afname van een vaginaal uitstrijk voor SOA diagnostiek verricht.

Inleveren vaginale uitstrijkje

Bij voorkeur levert u de envelop met het vaginale uitstrijkje zo spoedig mogelijk in op een locatie van SHO. Kijk op onze website www.sho.nl voor locaties en openingstijden.

Vergeet niet uw aanvraagformulier mee te nemen en een geldig legitimatiebewijs. U kunt de bijgeleverde envelop ook opsturen per post. Doe dit op de dag van verzamelen en niet in het weekend.

Zorg ervoor dat uw naam, adres, geboortedatum en afnamedatum op het aanvraagformulier staan.

Instructie voor het afnemen van een vaginale uitstrijk

1. Was eerst uw handen.
2. Open de verpakking met het buisje en haal het wattenstokje eruit.
3. Neem een gemakkelijke houding aan, zittend of staand, vergelijkbaar met die voor het inbrengen van een tampon.
4. Breng het wattenstokje 4-5 cm in de vagina en draai het 30 seconden rond. Zorg dat het watje langs de vaginawand strijkt.
5. Neem het wattenstokje uit de vagina en steek het in het buisje met de vloeistof met het watje naar beneden.

Wat als het stokje breekt terwijl het in de vagina zit?

Haalt u deze er dan voorzichtig uit. U kunt het stokje gewoon gebruiken voor het onderzoek.

6. Breek het stokje bij het streepje af en draai de dop er goed op (wattenstokje blijft dus in de buis achter).

Let op! Wanneer vloeistof uit het buisje is gespat, kunt u de test niet meer gebruiken. U kunt een nieuw afnamesetje bij uw huisarts vragen. Voorkom dat u met de vloeistof in contact komt.


7. Was uw handen.
8. Plak de sticker met daarop 'buis' op de buis net onder de dop.
9. Plak de sticker met daarop 'formulier' op de linkerbovenzijde van het aanvraagformulier.

10. Omwikkel de buis met het witte velletje, plaats dit in de blister en sluit deze.
11. Plaats de blister in de safetybag. Plak deze dicht door het witte plastic strookje er tussen uit te trekken.
12. Stop de safetybag samen met het aanvraagformulier in de envelop.
13. Draai het adreskaartje zo dat het adres van SHO zichtbaar is en rits de envelop dicht.
14. Lees de informatie over het inleveren van het vaginale uitstrijkje op de voorkant van deze folder.

De stappen afgebeeld:




Stap 2

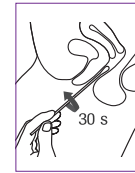


Stap 4



Stap 5

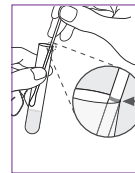

Stap 6

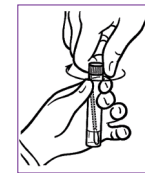

Uitslag van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek worden aan uw (huis)arts gezonden. Deze zal de uitslag met u bespreken.